



Flacon Thermo Scientific Samco Clicktainer

Système unique d'étanchéité à
clic fournissant protection des
échantillons et sécurité aux utilisateurs

Flacon Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™

Pour une protection ultime des échantillons et la sécurité de l'utilisateur en garantissant une application parfaite du bouchon en un seul geste

Thermo Fisher Scientific connaît la valeur des échantillons des patients. Leur collecte et transport doivent être aisés et sûrs. Les flacons Samco Clicktainer sont équipés d'un joint étanche et d'une ouverture large. Grâce au système de joint "à clic", l'utilisateur sait lorsque le bouchon est correctement fermé pour garantir la sécurité des échantillons.



**SYSTÈME DE
JOINT À CLIC**

**LA SÉCURITÉ D'ABORD
ET TOUJOURS**



Sécurité de l'utilisateur et protection des échantillons

**LA SÉCURITÉ D'ABORD
ET TOUJOURS**

Bouchon Clicktainer

- Indication visuelle, audible et tactile de la bonne fermeture du bouchon
- Bouchon à crans conçu pour réduire le risque de déchirure des gants ou de rupture pendant l'utilisation

Testé pour le transport pneumatique

- Idéal pour une utilisation dans les systèmes de transports pneumatiques des hôpitaux

Étanchéité haute performance

- Pression testée à 95 kPa conformément à la norme BS EN 14401
- Tests de fuite conformément à la norme BS EN 14254

Excellente transparence avec graduations bien lisibles

- Pour la visibilité des échantillons à l'intérieur du flacon

Empilable

- Stockage optimisé des échantillons

Choix du volume et ouverture large

- Volumes de 120 ml ou 90 ml adaptés à la plupart des applications
- Ouverture large de 53 mm pour faciliter la collecte et la gestion des échantillons

Disponible en version stérile et non stérile

- Stérilisé par rayonnement gamma pour le niveau de stérilité garanti SAL10⁻⁶

Marque CE

- Conforme aux exigences de la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

crans au niveau du bouchon et du fond

- Facile à manipuler avec des gants



*Le terme "étanche" s'applique aux produits Thermo Scientific Samco Clicktainer 90 ml/53 mm et 120 ml/53 mm qui répondent aux critères suivants : a) un test sous vide aspirant 95 kPa de pression au sein d'une chambre étanche sans fuite ; b) un test d'étanchéité conformément à la norme BS EN 14254, consistant à remplir le flacon de colorant et à le placer pendant 2 minutes sur un agitateur rotatif, suivi d'1 heure à l'envers dans un bain d'eau sans fuite. Remarque : reproduire ces tests avec d'autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage sûr, il est conseillé aux clients de tester les flacons Thermo Scientific Samco Clicktainer dans les conditions d'utilisation prévues pour les applications. Les flacons Thermo Scientific Samco Clicktainer sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu'ils sont associés à leurs bouchons Clicktainer.

Conformité ISO : testé conformément
aux exigences des normes
BS EN 14254 et BS EN 14401




Présentation des étiquettes, couleurs de bouchons et formats

Étiquettes à la présentation claire pour les champs d'identification du patient et les informations requises

- Disponible avec et sans étiquette
- Étiquette avec bande de température
- Bande de température uniquement
- Une étiquette, plusieurs langues : français, anglais, espagnol
- Marques FDA et CE obligatoires sur l'étiquette

Large gamme de couleurs de bouchons et de formats d'emballage

- La large gamme de couleurs de bouchons facilite la différenciation et la gestion des échantillons
- Disponibles sous forme de produit assemblé pour l'utilisation générale en laboratoire, les applications cliniques et la nécropsie de souris
- Disponibles en tant qu'éléments séparés pour l'automatisation de la fabrication en cas d'utilisation par les fournisseurs de solution au formol, d'acide borique, de thiosulfate de sodium ou autres réactifs à des fins de revente pour l'histologie, les analyses urinaires, les tests d'eau, etc.
- Produits emballés individuellement pour les environnements stériles tels que les blocs opératoires et les salles blanches
- Boîte distributrice idéale pour les petits laboratoires et les cabinets médicaux

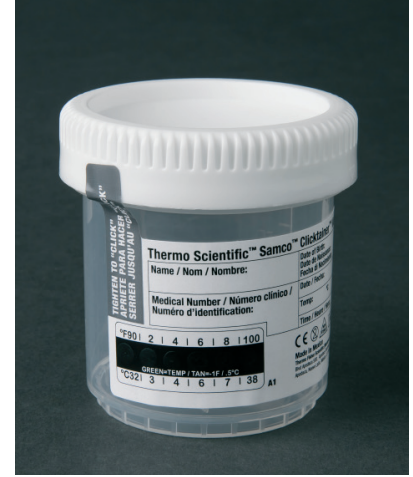

STERILE

Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ Vial

Full Name / Nom Complet / Nombre Completo:	Date of Birth: Date de Naissance: Fecha de Nacimiento:
Medical Number / Número clínico / Número d'identification:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Date / Fecha:	
Time / Heure / Hora:	

Made in Mexico
Thermo Fisher Scientific (Monterrey) S. de R.L. de C.V.
Blvd Apodaca 500, Apodaca Technology Park,
Apodaca, Nuevo León, México, C.P. 66600

CE

© 2014 ThermoFisher



**LA SÉCURITÉ D'ABORD
ET TOUJOURS**

Applications

Grâce à leur système de bouchon innovant, les flacons Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ sont adaptés à la collecte et au transport des liquides, solides et poudres. Ils sont donc parfaits pour une large gamme d'applications clients, depuis la collecte d'échantillons précieux et souvent dangereux de patients tels qu'urines, selles et expectorations à leur transport dans les systèmes de transport pneumatique, par le vide. Ils sont en outre adaptés à une utilisation avec du formol ou des fixateurs pour les applications histologiques.

Thermo Fisher Scientific soumet les flacons Samco Clicktainer à un certain nombre de procédures de tests d'étanchéité rigoureux. Nous effectuons un test sous vide en aspirant 95 kPa de pression au sein d'une chambre étanche, suivi d'un test d'étanchéité conformément à la norme BS EN 14254.

Ces flacons ont également été testés dans un système de transport pneumatique.

POUR
LA PROTECTION DES
ÉCHANTILLONS ET LA
SÉCURITÉ DES UTILISATEURS

Thermo Fisher Scientific propose une offre complète de consommables pour vos applications de laboratoire. Veuillez nous contacter pour plus de détails.





Code produit	Description	Couleur du bouchon	Format	Cdt intérieur/Qté par boîte
120 ml/53 mm				
15702197	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette à onglets, stérile	● Orange	Préassemblé	75/300
15722197	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette à onglets, stérile	○ Blanc	Préassemblé	75/300
15732197	Flacon SAMCO Clicktainer, sans étiquette, non stérile	○ Blanc	Bouchon et flacon séparés	300/300
15762197	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette sans onglet, non stérile	● Jaune	Préassemblé	75/300
15742197	Kits de prélèvement d'urines de milieu de jet SAMCO Clicktainer, sans entonnoir, stérile	○ Blanc	Préassemblé	1/100
15712197	Flacon SAMCO Clicktainer, sans étiquette, pochette pelable, stérile	● Orange	Préassemblé	1/100
15752197	Flacon SAMCO Clicktainer, sans étiquette, pochette pelable, stérile	○ Blanc	Préassemblé	1/100
90 ml/53 mm				
15782197	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette à onglets, stérile	● Orange	Préassemblé	100/400
15702207	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette à onglets, stérile	○ Blanc	Préassemblé	100/300
15772197	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette à onglets, bouchon vert, stérile	● Vert	Préassemblé	100/400
15792197	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette à onglets, stérile, pack distributeur	● Orange	Préassemblé	20/320
15712207	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette avec bande de température, stérile	○ Blanc	Préassemblé	100/300
15722207	Flacon SAMCO Clicktainer, bande de température uniquement, stérile	○ Blanc	Préassemblé	100/400
15732207	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette sans onglet, non stérile	○ Blanc	Préassemblé	75/300
15782207	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette sans onglet, non stérile	● Jaune	Préassemblé	100/400
15742207	Flacon SAMCO Clicktainer, étiquette avec bande de température, non stérile	○ Blanc	Préassemblé	300/300
15752207	Flacon SAMCO Clicktainer, sans étiquette, non stérile	○ Blanc	Bouchon et flacon séparés	300/300
15762207	Flacon SAMCO Clicktainer, sans étiquette, non stérile	○ Blanc	Préassemblé	300/300
15772207	Flacon SAMCO Clicktainer, bande de température uniquement, non stérile	○ Blanc	Préassemblé	100/400

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.eu.fishersci.com/go/clicktainer

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500